


PRELEVEMENTS DES HEMOCULTURES


Voir protocoles du CLIN (réf : PRC-001002, PRC-001420) à consulter sur le logiciel institutionnel NORMEA ou sur le site intranet (<http://polqua/CLIN/> puis protocoles de soins)

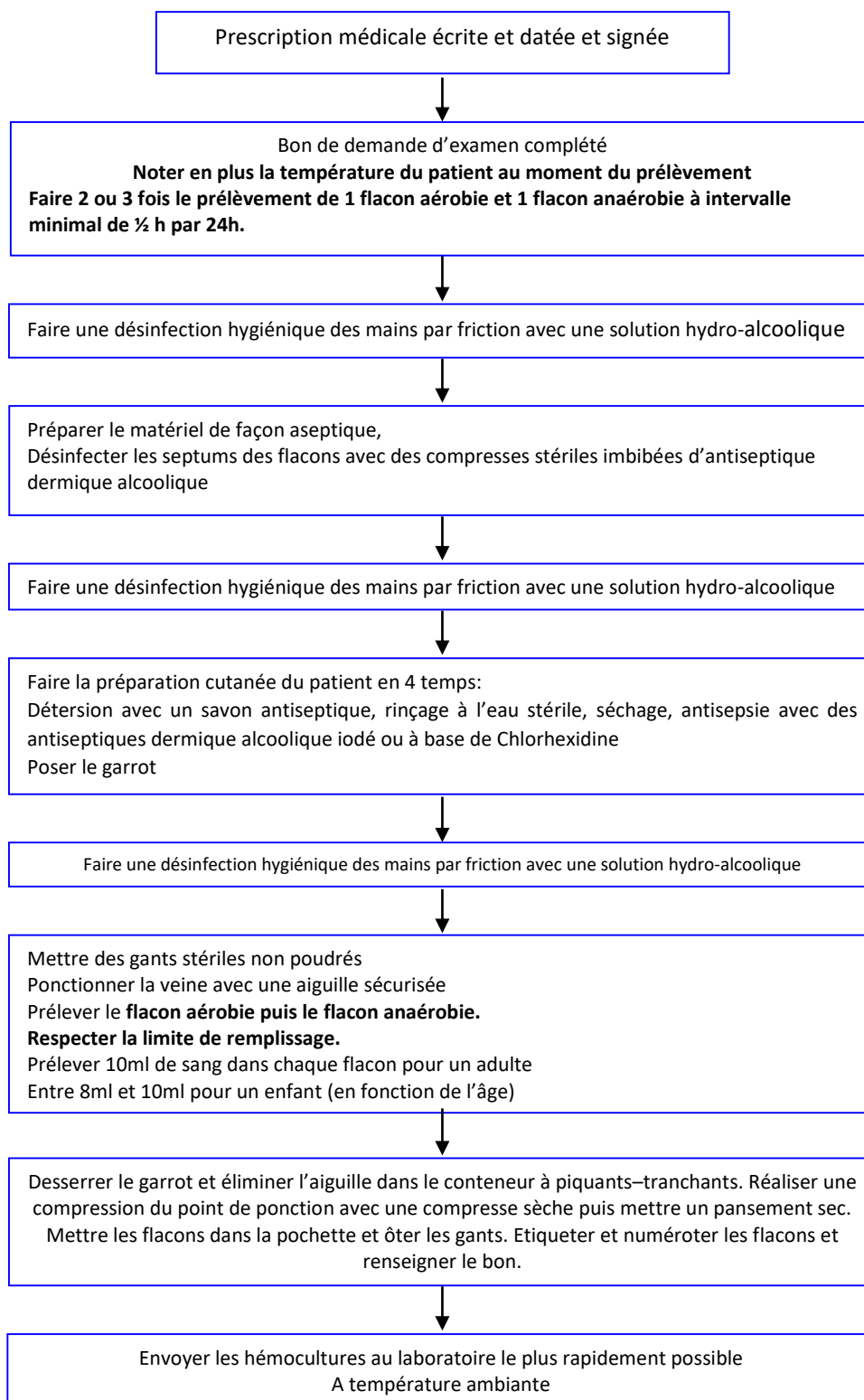

Avant le prélèvement :

Vérification de la péremption des flacons ET Bien étiqueter sur la zone destinée à cet effet

■ Etiquetage des flacons : 1 seule zone autorisée

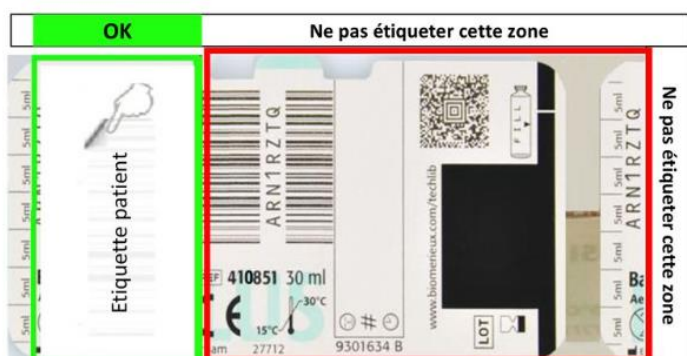

Si le positionnement de l'étiquette n'est pas correct, la mesure du volume ne peut pas être réalisée par l'automate

Contrôle de la pastille : marron → utiliser le flacon / jaune → jeter le flacon



Prélever le flacon AEROBIE en 1er afin de purger la tubulure, puis le flacon ANAEROBIE en 2nd.

Remplissage des flacons aérobie verts et oranges (adulte). Remplir chaque flacon jusqu'au repère noté sur l'étiquette



NB : Le repère visuel n'est pas présent sur les flacons pédiatriques

La **quantité de sang** : C'est le critère majeur de positivité des hémocultures.

Il est préférable de prélever 1 seul flacon bien rempli plutôt que 2 non suffisamment remplis.

Volume optimal par flacon = 10 ml chez l'adulte → flacon mal rempli = risque de faux négatif

Prélever 4 à 6 flacons par patient, en un seul prélèvement

Chez l'enfant :

Poids de l'enfant	Flacon à prélever	Volume de sang	Nombre de flacon
<1kG	Flacon pédiatrique (1 graduation = 4ml)	0.5 - 2ml	1
1 - 1.2Kg		1.5 - 4.5ml	1
2.1 - 12.9Kg		3 - 6ml	1
13 - 36Kg	Flacon adulte aérobie + anaérobie	5ml	2-3 aérobies + 2-3 anaérobies
>36KG		5 ml	2-3 aérobies + 2-3 anaérobies

Cas particulier

Suspicion d'endocardite

- Prélever 6 paires minimum sur 24 heures à 3 temps différents
- Préciser impérativement la notion d'endocardite sur le bon de demande (incubation prolongée au laboratoire 10 jours) ou utiliser le Kit endocardite *

Suspicion d'infection de dispositif intraveineux (cathéter centraux, chambre implantable)

- Prélever d'une paire d'hémoculture aérobie et anaérobie en périphérie par ponction veineuse et une autre paire aérobie et anaérobie à partir du dispositif intravasculaire.
- Bien noter le site de prélèvement sur le bon**